

# LUCAS™2-BATTERILADER

## Brugervejledning

DK

LUCAS™2-batterilader (også betegnet som oplader) er et tilbehør til LUCAS™2-brystkompressionssystem. Det er en separat enhed, der er beregnet til at oplade LUCAS™2-batteriet.

### OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

LUCAS™2-batteriopladeren overholder kravene i følgende EU-direktiver:

2006/95/EF Lavspændingsdirektivet




2004/108/EF EMC-direktivet



Enheden er mærket med CE-symbolet: **CE** 0434

© Copyright JOLIFE AB 2009. Alle rettigheder forbeholdes.

LUCAS™ er et varemærke tilhørende JOLIFE AB.

### LÆS DENNE VEJLEDNING FØR BRUG AF LUCAS™2-BATTERIOPLADER:

	<b>Forsigtig – Se brugervejledningen</b> Enhver, der skal betjene enheden, skal læse hele brugervejledningen, før LUCAS™2-batteriladeren benyttes.
	LUCAS™2-batteriladeren må udelukkende benyttes sammen med JOLIFE-produkter.
	Stikkontakten skal være let tilgængelig. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal stikket øjeblikkeligt tages ud af stikkontakten.
	LUCAS™2-batteriladeren er beregnet til brug inden døre og må ikke udsættes for vand eller støv.
	LUCAS™2-batteriladeren er under farlig spænding, og dækslet må derfor ikke aftages. Al eftersyn eller vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret personale, der kan få hjælp ved at kontakte producentens repræsentant.
	<b>ADVARSEL</b> LUCAS™2-batteriladeren har interne sikringer, der sprænger, hvis der opstår en fejl i opladeren. Sådanne fejl skal repareres af kvalificeret servicepersonale.
	Kontrollér, at strømkablet ikke er beskadiget. Hvis strømkablet er beskadiget, må LUCAS™2-batteriladeren ikke anvendes.
	Tildæk aldrig LUCAS™2-batteriladeren, mens den er i brug.
	LUCAS™2-batteriladeren tændes ved at slutte strømkablet til en stikkontakt. Når strømkablet trækkes ud af stikkontakten, slukkes den.

	Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke kasseres sammen med husholdningssaffald, men skal kasseres via separat indsamling, behandling, genindvinding/genanvendelse og miljømæssigt korrekt.
	Produktionsår er påtrykt typeskiltet ud for dette symbol.

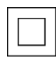



## FORBEREDELSE FØR FØRSTE IBRUGTAGNING

Slut strømkablet til udgangen på opladeren.

## OPLADNINGSANVISNINGER

- Sæt et LUCAS™2-batteri i opladeren.
- Slut strømkablet til stikkontakten. Indikatoren (lysdiode) øverst på opladeren viser status for opladeren:
  - Rød – Oplader
  - Gul – Oplader (80-95 % fuldført)
  - Grøn – Fuldt opladet/standby
- Når batteriet er fuldt opladet (indikatoren lyser grønt):
  - Tag strømkablet ud af stikkontakten.
  - Tag batteriet ud af opladeren

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Type	Litium-ion-batterioplader		
Antal celler	7		
Indgang	90-264 V vekselstrøm, 47-63 Hz, maks. 0,9 A		
Temperaturområde – drift	-20 °C – +40 °C		
Temperaturområde – opbevaring	-25 °C – +85 °C		
Isoleringsklasse	II		
Rød	Oplader	LUCAS™2-batteriopladningsniveau: 	1.2 A , 29.4 V
Gul	Oplader (80-95 % fuldført)	LUCAS™2-batteriopladningsniveau: 	29.4 V , < 0.5 A
Grøn	Klar/standby	LUCAS™2-batteriopladningsniveau: 	

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte producenten Jolife AB.

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Sverige Tlf.: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, E-mail: [info@jolife.com](mailto:info@jolife.com)  
[jolife.com](http://jolife.com)

LUCAS er et varemærke tilhørende JOLIFE AB.  
**CE 0434 © 2009 JOLIFE AB**