

# LUCAS™2 BATTERILADER

## Bruksanvisning

NO

LUCAS™2 batterilader (også omtalt som lader) er et tilbehør til LUCAS™2 hjertekompresjonssystem. Det er en frittstående enhet, ment for opplading av batteriet til LUCAS™2 (også kalt batteriet).

### SAMSVARERKLÆRING

LUCAS™2 batterilader samsvarer med kravene i følgende europeiske direktiver:

2006/95/EC lavspenningsdirektivet (LVD)

2004/108/EC EMC-direktivet




Enheten er merket med CE-symbolet: **CE** 0434



© Copyright JOLIFE AB 2009. Alle rettigheter forbeholdt.

LUCAS™ er varemerke for JOLIFE AB.

### LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER

#### LUCAS™2 BATTERILADER:

	<b>Forsiktig – se bruksanvisningen</b> Alle brukere må lese hele bruksanvisningen før bruk av LUCAS™2 batterilader.
	LUCAS™2 batterilader må bare brukes til JOLIFE-produkter.
	Stikkkontakten må være lett tilgjengelig. Hvis det oppstår en feil, må støpselet trekkes ut av stikkkontakten umiddelbart.
	LUCAS™2 er laget for bruk innendørs, og må ikke utsettes for vann eller støv.
	LUCAS™2 batterilader inneholder farlige spenninger, og dekkelet må ikke fjernes. Alt service- og vedlikeholdsarbeid må utføres av kvalifiserte personer som kan få assistanse ved å kontakte produsentens representant.
	<b>ADVARSEL</b>
	LUCAS™2 batterilader har innvendige sikringer som går hvis det oppstår feil i laderen. Slike feil må repareres av kvalifisert servicepersonell.
	Kontroller at strømledningen ikke er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må LUCAS™2 batterilader ikke brukes.
	LUCAS™2 batterilader må ikke tildekkes når den er i bruk.
LUCAS™2 batterilader slås på ved å koble den til en stikkontakt. Laderen slås av ved å trekke ut støpselet.	

	Elektrisk og elektronisk avfall må ikke kastes som husholdningsavfall, men må leveres til et godkjent mottak for resirkulering og miljøsikker avfallshåndtering.
	Produksjonsåret er trykt på typeetiketten ved siden av dette symbolet.

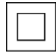



## KLARGJØRING TIL FØRSTE GANGS BRUK

Koble strømledningen til kontakten på laderen.

## INSTRUKSJONER FOR LADING

- Sett et LUCAS™2 batteri i laderen.
- Koble strømledningen til en stikkontakt. Lysdioden øverst på laderen viser ladestatus:
  - Rød – Lader
  - Gul – Lader (80-95 % fullført)
  - Grønn – Fullt ladet / standby
- Når batteriet er fullt ladet (lysdioden lyser grønt):
  - Koble strømledningen fra stikkontakten
  - Fjern batteriet fra laderen

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Type	Litium-ion-batterilader		
Antall celler	7		
Inngang	90-264 VAC, 47-63 Hz, maks. 0,9 A		
Temperaturområde – bruk	-20 °C – +40 °C		
Temperaturområde – oppbevaring	-25 °C – +85 °C		
Isolasjonsklasse	II		
Rød	Lader	LUCAS™2 batterilade-nivå: 	1.2 A , 29.4 V
Gul	Lader (80-95 % fullført)	LUCAS™2 batterilade-nivå: 	29.4 V , < 0.5 A
Grønn	Klar / standby	LUCAS™2 batterilade-nivå: 	



Kontakt produsenten Jolife AB hvis du vil ha mer informasjon

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Sverige Tlf.: +46 (0) 46 286 50 00, Faks.: +46 (0) 46 286 50 10, E-post: [info@jolife.com](mailto:info@jolife.com)  
[jolife.com](http://jolife.com)

LUCAS er varemerke for JOLIFE AB.  
 CE 0434 © 2009 JOLIFE AB