

# NABÍJEČKA BATERÍ LUCAS™2

## Návod k použití

CZ

Nabíječka baterií LUCAS™2 (označovaná také jako Nabíječka) je příslušenství Systému pro komprese hrudníku LUCAS™2. Jedná se o samostatnou jednotku, která slouží k nabíjení baterie LUCAS™2 (označované také jako Baterie).




### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Nabíječka baterií LUCAS™2 splňuje požadavky následujících evropských směrnic: 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD) (pro nízké napětí)  
2004/108/EC EMC Directive (elmg. kompatibilita)

Zařízení je označeno symbolem CE: **CE 0434**

© Copyright JOLIFE AB 2009. Všechna práva vyhrazena.  
LUCAS™ je ochranná známka společnosti JOLIFE AB.

### PŘED POUŽITÍM NABÍJEČKY BATERÍ LUCAS™2 SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

	<b>Pozor – čtěte Návod k použití.</b> Všichni uživatelé si musí před použitím nabíječky baterií LUCAS™2 přečíst celý Návod k použití.
	Nabíječku baterií LUCAS 2™ je možné používat pouze s výrobky společnosti JOLIFE.
	Síťová zásuvka musí být snadno přístupná. Pokud dojde během používání zařízení k závadě, je třeba okamžitě vytáhnout zástrčku z el. zásuvky.
	Nabíječka baterií LUCAS™2 je určena pro vnitřní použití a nesmí být vystavena působení vody nebo prachu.
	Uvnitř nabíječky baterií LUCAS™2 se vyskytuje nebezpečné napětí a kryt se nesmí sundávat. Veškeré servisní či údržbářské činnosti smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník, který může získat pomoc od výrobce.
	<b>VAROVÁNÍ</b> Nabíječka baterií LUCAS™2 obsahuje interní pojistky, které při závadě nabíječky prasknou. Takové závady musí opravit kvalifikovaný servisní pracovník.
	Kontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozen, nabíječka baterií LUCAS™2 se nesmí používat.
	Při používání nabíječku baterií LUCAS™2 nezakrývejte.
	Nabíječka baterií LUCAS™2 se zapíná zapojením do el. zásuvky. Odpojením ze zásuvky se vypne.

	Elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem, ale prostřednictvím samostatného sběru, zpracování, obnovy či recyklace a ekologické likvidace.
	Rok výroby je vytištěn na typovém štítku vedle tohoto symbolu.

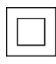



## PŘÍPRAVA K PRVNÍMU POUŽITÍ

Zapojte napájecí kabel do zdířky na nabíječce.

## POSTUP NABÍJENÍ

- Vložte baterii LUCAS™2 do nabíječky.
- Zapojte napájecí kabel do el. zásuvky. Kontrolka na horní straně nabíječky ukazuje stav nabíječky:
  - červená – nabíjí se
  - žlutá – nabíjí se (baterie je nabitá na 80-95 %)
  - zelená – baterie je plně nabitá/nabíječka je v pohotovostním stavu
- Když je baterie plně nabitá (kontrolka svítí zeleně), postupujte následovně:
  - Odpojte napájecí kabel z el. zásuvky.
  - Vyjměte baterii z nabíječky.

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Typ	Nabíječka Li-Ion baterií		
Počet článků	7		
Příkon	90-264 VAC, 47-63 Hz, max 0,9 A		
Rozsah teploty – provoz	-20 °C – +40 °C		
Rozsah teploty – skladování	-25 °C – +85 °C		
Třída izolace	II		
Červená	nabíjí se	Úroveň nabití baterie LUCAS™2: 	1.2 A , 29.4 V
Žlutá	nabíjí se (baterie je nabitá na 80-95 %)	Úroveň nabití baterie LUCAS™2: 	29.4 V , < 0.5 A
Zelená	baterie je nabitá / nabíječka je připravena	Úroveň nabití baterie LUCAS™2: 	

Další informace získáte u výrobce, společnosti Jolife AB.

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Sweden Tel.: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, E-mail: [info@jolife.com](mailto:info@jolife.com)  
[jolife.com](http://jolife.com)

LUCAS je ochranná známka společnosti JOLIFE AB.  
 CE 0434 © 2009 JOLIFE AB