

ŁADOWARKA BATERII LUCAS™2

Instrukcja użytkownika

PL

Ładowarka baterii LUCAS™2 (zwana Ładowarką) jest elementem dodatkowym systemu masażu serca LUCAS™2. To oddzielna jednostka przeznaczona do ładowania baterii LUCAS™2 (zwanej Bateria).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Ładowarka baterii LUCAS™2 jest zgodna z wymaganiami następujących europejskich dyrektyw:

Dyrektywa niskiego napięcia (LVD) 2006/95/EC




Dyrektywa EMC 2004/108/EC


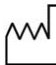
Urządzenie jest oznaczone symbolem CE:  0434

© Copyright JOLIFE AB 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LUCAS™ jest znakiem towarowym firmy JOLIFE AB.

PRZECZYTAĆ TE INSTRUKCJE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA ŁADOWARKI LUCAS™2:

	Przeostroga – należy zapoznać się z instrukcją użytkownika. Wszystkie osoby obsługujące muszą przeczytać całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania ładowarki LUCAS™2.
	Ładowarki baterii LUCAS™2 można używać tylko z produktami JOLIFE. Gniazdo zasilania powinno być łatwo dostępne. Jeżeli pojawi się błąd eksploatacyjny, należy natychmiast odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania.
	Ładowarka baterii LUCAS™2 jest przeznaczona do użytku we wnętrzach i nie może być wystawiana na działanie wody lub kurzu.
	Wewnątrz ładowarki LUCAS™2 występuje niebezpieczne napięcie i jej pokrywa nie może być zdejmowana. Wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, który może uzyskać pomoc kontaktując się z przedstawicielem producenta.
	OSTRZEŻENIE Ładowarka baterii LUCAS™2 ma wewnętrzne bezpieczniki, które się przepalają w przypadku jej uszkodzenia. Takie uszkodzenia muszą być naprawiane przez wykwalifikowany personel.
	Sprawdzać, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, ładowarka baterii LUCAS™2 nie może być używana.
	Nie przykrywać ładowarki baterii LUCAS™2, gdy pracuje.
	Ładowarka baterii LUCAS™2 jest włączana poprzez podłączenie do gniazda zasilania. Odłączenie od zasilania powoduje jej wyłączenie.

	Sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z odpadami gospodarstwa domowego, ale musi być zutyliizowany poprzez selektywną zbiórkę, przetworzenie, odzysk/ponowne wykorzystanie lub utylizację przyjazną dla środowiska.
	Rok produkcji jest wydrukowany koło tego symbolu na etykiecie z oznaczeniem typu.

PRZYGOTOWANIA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Podłączyć przewód zasilania do przyłącza na ładowarce.

INSTRUKCJE ŁADOWANIA

- Umieścić baterię LUCAS™2 w ładowarce.
- Podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania. LED (dioda emitująca światło) na górnej części ładowarki pokazuje jej status:
 - Czerwona – Ładowanie
 - Żółta – Ładowanie (ukończono 80-95%)
 - Zielona – Pełne naładowanie/ gotowość
- Gdy bateria jest w pełni naładowana (LED świeci na zielono):
 - Odłączyć przewód zasilający z gniazda zasilania
 - Wyjąć baterię z ładowarki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ	Ładowarka baterii litowo-jonowej		
Ilość komórek	7		
Wejście	90-264 VAC, 47-63 Hz, maks. 0,9A		
Zakres temperatur – działanie urządzenia	-20 °C – +40 °C		
Zakres temperatur – przechowywanie	-25 °C – +85 °C		
Klasa izolacji	II		
Czerwony	Ładowanie	Poziom naładowania baterii LUCAS™2: 	1.2 A , 29.4 V
Żółty	Ładowanie (zakończono 80-95%)	Poziom naładowania baterii LUCAS™2: 	29.4 V , < 0.5 A
Zielony	baterie je nabitá / nabiječka je připravena	Poziom naładowania baterii LUCAS™2: 	

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z producentem: Jolife AB

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Szwecja, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Faks: +46 (0) 46 286 50 10, E-mail: info@jolife.com

jolife.com

LUCAS jest znakiem towarowym firmy JOLIFE AB.
CE 0434 © 2009 JOLIFE AB