

LUCAS™2 AKKUMULÁTORTÖLTŐ

Használati útmutató

HU


A LUCAS™2 akkumulátortöltő (a továbbiakban röviden: töltő) a LUCAS™2 mellkasi kompressziós rendszer tartozéka. A töltő a LUCAS™2 akkumulátor (a továbbiakban röviden: akkumulátor) töltésére szolgáló önálló berendezés.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A LUCAS™2 akkumulátortöltő megfelel a következő európai irányelvek követelményeinek:

2006/95/EK jelű irányelv a kisfeszültségű villamos termékekről (LVD)




2004/108/EK jelű irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (EMC)


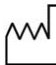
A készülék CE jelöléssel van ellátva:  0434

© Copyright JOLIFE AB 2009. Minden jog fenntartva.

A LUCAS™ a JOLIFE AB védjegye.

A LUCAS™2 AKKUMULÁTORTÖLTŐ HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT:

	<p>Figyelem! – tekintse meg a használati útmutatót</p> <p>Minden kezelőnek a teljes használati útmutatót el kell olvasnia, mielőtt a LUCAS™2 akkumulátortöltőt használatba venné.</p>
	<p>A LUCAS™2 akkumulátortöltő csak a JOLIFE termékeivel használható.</p>
	<p>A hálózati aljzat könnyen hozzáférhető helyen legyen. Működési hiba esetén azonnal ki kell húzni a dugaszt az aljzataból.</p>
	<p>A LUCAS™2 akkumulátortöltő beltéri használatra készült, nem tehető ki víz vagy por hatásának.</p>
	<p>A LUCAS™2 akkumulátortöltő belsejében veszélyes feszültség van jelen, a készülék burkolatát nem szabad eltávolítani. Minden javítási és karbantartási munkát képzett szakembernek kell végeznie, aki a gyártó képviselőéhez fordulva segítséget kaphat.</p>
	<p>VIGYÁZAT!</p> <p>A LUCAS™2 akkumulátortöltő belső biztosítékai a töltő hibája esetén kiolvadnak. Az ilyen hibákat képzett szervizszakembernek kell kijavítania.</p>
	<p>Ellenőrizze, nem sérült-e a hálózati csatlakozósinór. Sérült hálózati csatlakozósinórral tilos használni a LUCAS™2 akkumulátortöltőt.</p>
	<p>Ne takarja le a LUCAS™2 akkumulátortöltőt, amikor az használatban van.</p>
	<p>A LUCAS™2 akkumulátortöltő bekapcsolásához be kell szűrni a csatlakozódugót a hálózati aljzatba. A dugó kihúzásával a készülék kikapcsol.</p>

	Az elektromos és elektronikus készülékek nem dobhatók a kommunális hulladékba, elkülönítve kell őket gyűjteni, kezelni, anyagaikat visszanyerni/újrahasznosítani, illetve a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően ártalmatlanítani.
	A gyártás éve a típuscímken van feltüntetve, az itt látható jelzés mellett.





ELŐKÉSZÍTÉS AZ ELSŐ HASZNÁLATRA

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozósínort a töltő aljzatához.

ÚTMUTATÁS A TÖLTÉSHEZ

- Helyezze a LUCAS™2 akkumulátort a töltőbe.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozósínort a hálózati aljzathoz. A töltő tetején található jelzőlámpa a készülék állapotát mutatja:
 - Piros – töltés
 - Sárga – töltés (80–95% kész)
 - Zöld – teljesen feltöltve/készenlét
- Az akkumulátor teljes feltöltése után (a lámpa zölden világít):
 - Húzza ki a csatlakozódugaszt a hálózati aljzathoz.
 - Vegye ki az akkumulátort a töltőből.

MŰSZAKI ADATOK:

Típus	Lítiumionos akkumulátor töltője		
Cellák száma	7		
Bemenet	90–264 V AC, 47–63 Hz, max. 0,9 A		
Hőmérséklet-tartomány – üzemi	-20 °C – +40 °C		
Hőmérséklet-tartomány – tárolási	-25 °C – +85 °C		
Szigetelési besorolás	II		
Piros	Töltés	LUCAS™2 akkumulátor töltöttségi szintje: 	1.2 A , 29.4 V
Sárga	Töltés (80–95% kész)	LUCAS™2 akkumulátor töltöttségi szintje: 	29.4 V , < 0.5 A
Zöld	Kész/készenlét	LUCAS™2 akkumulátor töltöttségi szintje: 	

További tájékoztatással a gyártó, a Jolife AB szolgálhat.

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Svédország, tel.: +46 (0) 46 286 50 00, fax: +46 (0) 46 286 50 10, e-mail: info@jolife.com

jolife.com

A LUCAS a JOLIFE AB védjegye.
CE 0434 © 2009 JOLIFE AB