

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕИ LUCAS™2

Инструкция по применению

RU

Зарядное устройство для батареи LUCAS™2 (также именуемое Зарядное устройство) является аксессуаром для системы непрямого массажа сердца LUCAS™2. Это отдельное устройство, предназначенное для зарядки батареи LUCAS™2 (в дальнейшем именуемой Батарей).

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Зарядное устройство для батареи LUCAS™2 соответствует требованиям следующих европейских директив:

2006/95/EC Директива по низковольтному оборудованию (LVD)

2004/108/EC Директива по электромагнитной совместимости (EMC)




Изделие маркировано знаком соответствия европейским директивам качества CE:



CE 0434

© Авторское право JOLIFE AB 2009. Все права защищены.

LUCAS™ является торговой маркой JOLIFE AB.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ БАТАРЕИ LUCAS™2:

	Предупреждение – смотрите инструкции по применению Все операторы перед работой с зарядным устройством для батареи LUCAS™2 должны полностью прочитать настоящую инструкцию по применению.
	Зарядное устройство для батареи LUCAS™2 может использоваться только с изделиями JOLIFE. Сетевая розетка должна находиться в доступном месте. При возникновении проблем в работе устройства следует немедленно вынуть вилку из розетки.
	Зарядное устройство для батареи LUCAS™2 предназначено только для использования внутри помещений и не должно подвергаться воздействию воды или пыли.
	Зарядное устройство LUCAS™2 работает с опасным напряжением; запрещается снимать крышку устройства. Все сервисные работы и работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированными специалистами; при необходимости для получения поддержки они могут обратиться к представителю производителя.
	ВНИМАНИЕ Зарядное устройство для батареи LUCAS™2 оснащено внутренними предохранителями, которые перегорят при возникновении неполадок в работе зарядного устройства. Устранение таких неполадок должно осуществляться квалифицированными сервисными специалистами.
	Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был поврежден. Запрещается использовать зарядное устройство для батареи LUCAS™2 с поврежденным сетевым шнуром.
	Не накрывайте работающее зарядное устройство LUCAS™2.
	Зарядное устройство для батареи LUCAS™2 включается путем его подключения к сетевой розетке. При отключении из сетевой розетки устройство отключается.

	Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Утилизация должна проводиться путем отдельного сбора, обработки, повторного использования и экологически чистого захоронения.
	Год изготовления напечатан на бирке рядом с данным символом.

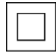



ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подключите шнур электропитания к разъему зарядного устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАРЯДКИ

- Вставьте батарею LUCAS™2 в зарядное устройство.
- Подключите шнур электропитания к сетевой розетке. Светодиод на верхней части зарядного устройства показывает статус зарядного устройства:
 - Красный – выполняется зарядка
 - Желтый – выполняется зарядка (степень зарядки 80-95%)
 - Зеленый – зарядка завершена / режим ожидания
- Когда батарея полностью заряжена (зеленый светодиод):
 - Отключите шнур электропитания от сетевой розетки
 - Выньте батарею из зарядного устройства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Зарядное устройство для литий-ионных батарей		
Количество ячеек	7		
Входное напряжение	90-264 В перем. тока, 47-63 Гц, макс. 0,9 А		
Диапазон рабочих температур	-20 °C – +40 °C		
Диапазон температур хранения	-25 °C – +85 °C		
Класс изоляции	II		
Красный	Выполняется зарядка	Уровень зарядки батареи LUCAS™2: 	1.2 А , 29.4 В
Желтый	Выполняется зарядка (степень зарядки 80-95%)	Уровень зарядки батареи LUCAS™2: 	29.4 В , < 0.5 А
Зеленый	Готово / режим ожидания	Уровень зарядки батареи LUCAS™2: 	



За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к производителю Jolife AB

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Sweden Тел: +46 (0)46 286 50 00, Факс: +46 (0)46 286 50 10, Электронная почта: info@jolife.com

jolife.com

LUCAS является торговой маркой JOLIFE AB.
CE 0434 © 2009 JOLIFE AB